

# 立体構造をしっかりとキープ!


NIOSH規格  
**N95**  
合格品



写真はDD02-N95-2K

ラムダライン  
**LINE**

ラムダラインは、λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりとキープするマスクの愛称。

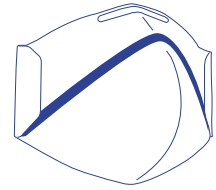

動画  
「装着・外し方」



リーフレット  
「装着方法」




## 3つの機能で もれなく安全

**1** アジャスター  
しめひもの長さ調節ができます。

**2** クッション  
内側のクッションによって、マスクと鼻部の  
すき間をなくすことができます。



ぴったり  
密着!

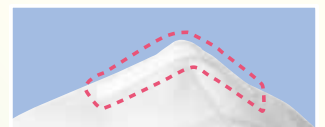

**3** 鼻当て  
外側の鼻当てによって、  
鼻の形に合わせることができます。

●金属部品を使用していません。

日本製

### 個装タイプ

個装で衛生的 ……



品番: DD02-N95-2K DD02V-N95-2K  
数量: 1箱10個入  
小箱寸法: 約 108 × 183 × 95 mm

コンパクト ……

名刺サイズタイプ



品番: DD01-N95-2K DD01V-N95-2K  
数量: 1箱10個入  
小箱寸法: 約 130 × 130 × 72 mm

配布・備蓄用に ……



品番: DD02-N95-2K DD02V-N95-2K  
数量: 1箱100個入  
大箱寸法: 約 406 × 249 × 191 mm

### 二つ折タイプ

毎日の作業に ……



品番: DD02-N95-2K DD02V-N95-2K  
数量: 1袋10個入  
袋寸法: 約 330 × 55 × 220 mm

**DD02-N95-2K**

**丸み** のあるデザイン



合格番号 TC-84A-7646

**DD02V-N95-2K**

**丸み** のあるデザイン

排気弁付

熱気やムレによる  
不快感や息苦しさを  
軽減します。



合格番号 TC-84A-7645

**DD01-N95-2K**




合格番号 TC-84A-7642

**DD01V-N95-2K**

排気弁付

熱気やムレによる  
不快感や息苦しさを  
軽減します。

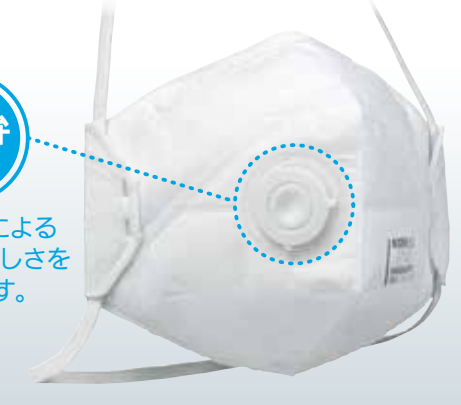

合格番号 TC-84A-7644

**排気弁付** はご自身の予防のためにお使いください。  
(咳エチケットにはなりません。)

保存期限

未開封の状態、製造日から **6年**


**密着性の確認 (シールチェック ユーザーシールチェック)**

密着性の良否を確認する機器  
(マスク内圧・フィッティング  
テスター等)を用いる(定量法)か、  
次の方法(定性法)でご確認ください。

- マスク全体を両手で覆い、  
**陽圧法** 息を吐きます。
- 陰圧法** すばやく息を吸います。

※排気弁付きは、陰圧法でシールチェックをしてください。

**マスクと顔の間から空気の漏れがなければ、密着性は良好です。**

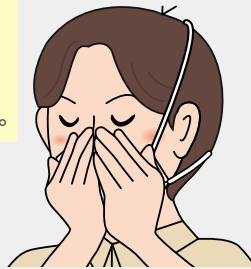

■商品コード

品番	タイプ	入り数[個]	商品コード
DD02-N95-2K	個装	10	30371
		100	30376
DD02V-N95-2K	個装	10	30370
		100	30377
DD01-N95-2K	個装	10	30378
		100	30377
DD01V-N95-2K	二つ折	10	30375
		10	30330
DD01V-N95-2K	(名刺サイズ)	10	30340
		10	30340



日本の国家検定を受検していませんので、  
日本国内での労働衛生対策用としては使用しないでください。

●改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。



株式会社 **重松製作所**  
SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

www.sts-japan.com

本 社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1 TEL 03(6903)7525(代表)

札幌 011(743)6001 横浜 045(314)0921 倉敷 086(450)2221  
 仙台 022(235)7733 上越 025(545)4350 広島 082(871)5510  
 熊谷 048(529)7566 名古屋 052(682)4798 新居浜 0897(33)8666  
 東京 03(3915)8081 大阪 06(6953)8521 福岡 092(431)1265  
 千葉 043(301)3004 姫路 079(267)6788 長崎 095(883)1713